

Wózek specjalny



inovys2



INOVYS 2 pozwala na ciągłe utrzymywanie idealnej dla pacjenta postawy przy szerokim zakresie adaptacji wymiarów do pacjenta. Zarówno kąt oparcia jak i siedziska może być łatwo regulowany niezależnie. Pozostałe parametry wózka również można dopasować do indywidualnych wymagań pacjenta. Wyposażony standardowo w ortopedyczną tapicerkę typu SOFT zrobioną ze specjalnego materiału obiciowego bardzo delikatnego dla ciała i bardzo wytrzymałego.

Wózki przeznaczone dla osób leżących wymagających długoterminowej opieki, niestabilnych. Takie osoby nie zawsze kwalifikują się na szeroko rozumiany wózek inwalidzki, który po prostu ze względów funkcjonalnych dla takich osób nie stanowi żadnego komfortu ani bezpieczeństwa. Dla takich osób potrzebny jest sprzęt, który skutecznie spełni swoją rolę przede wszystkim z punktu zmiany pozycji oraz stabilizacji postawy. Wózek jest bardzo skuteczny dla pacjentów leżących, których przygotowuje się do uzyskania pozycji siedzącej.

Estetyka, niezawodność i funkcjonalność to idea, która przyświeca naszej fabryce przy projektowaniu. Najwyższa Jakość jest wyznacznikiem stosowanych technologii do produkcji i montażu, potwierdzona przez certyfikowane Instytuty w większości krajach Europejskich.



inovys 2



Wózek na zdjęciu wyposażony w oparcie ortopedyczne TARTA®-opcja.



Wózek na zdjęciu wyposażony w półkę na respirator - opcja.



Wózek na zdjęciu wyposażony w koła transportowe - opcja.



Wózek wyposażony w gorset Comfortable Duo Plus-opcja.

Regulowany kąt oparcia.

- Regulowany kąt siedziska.
- Regulowana głębokość siedziska.
- Możliwość obniżania siedziska względem podłoża
- Możliwość poszerzania pola siedzenia.
- Siedzisko z gąbki z pamięcią.




Zagłówek zapewnia pozycjonowanie głowy w wielu płaszczyznach.

Podłokietniki można wyciągać, regulować na wysokość, głębokość, oraz rozsuwać na boki.



Oparcie **Contour-Soft** z głębokimi bocznymi pelotami stabilizujące tułów. Gwarancja komfortu i bezpieczeństwa.

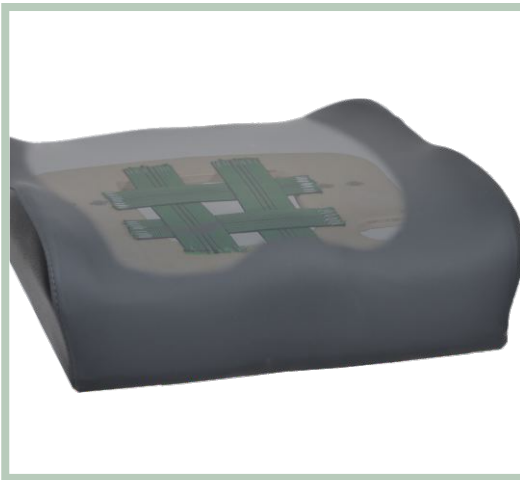

Siedzisko Contour-Soft z bocznymi wyprofilowaniami stabilizującymi uda. Wybrzuszenie przedniej części zabezpiecza przed zsuwaniem się. Podstawa siedziska z otworem ze sprężynującymi pasami doskonale stabilizuje miednicę. Multipozycyjny zagłówek typu ORTHO stanowi idealne podparcie głowy.



Specjalne zaczepy mocujące oparcie do ramy wózka umożliwiają przesuwanie oparcia w pionie i poziomie. Można w ten sposób podwyższyć oparcie lub zwiększyć głębokość siedzenia.



- Podparcie łydki regulowane,
- podparcie stopy regulowane .



Wózek składany do transportu.



Stopki przeciw-wywrotne, na których można w domu po odwróceniu i wypięciu kół tylnych postawić wózek w mieszkaniu.



Regulowane na wysokość rączki do pchania.

62 67 72	39-44 44-49 50-54	19-28	42-48	103	50/56	0°/20°	35°	-19°/113°	42-48	110	135

rama:	tapicerka

Uwaga :Parametry mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka. Dopuszcza się rozbieżność parametrów w zakresie 1,5cm, 1,5 kg, 1,5°!

